


SER 158 АВТОМАТИЧНИЙ ЕКСТРАКТОР

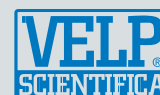

SER 158 – повністю автоматизований екстрактор, що поєднує в собі сучасні технології, точність та інтелектуальне управління даними.

Оператор повинен просто підготувати зразок і почати аналіз одним натисканням миші. Функція автоматичного вимикання дає змогу працювати цілодобово й без вихідних.

Інноваційна система ControlPad може самостійно управляти чотирма блоками SER 158 і відображати результати розрахунку на блоці управління.

SER 158 використовує технологію TEMS™ для значної економії часу, енергії, грошей і простору, будучи внеском VELP в охорону навколишнього середовища.



| Прилад | Джерело живлення | № |
|------------------------------|------------------------|-----------|
| SER 158/3 | 115 / 230В, 50 / 60 Гц | S303A0390 |
| SER 158/6 | 115 / 230В, 50/ 60 Гц | S303A0380 |
| SER 158/3 без пульта упр. | 115 / 230В, 50 / 60 Гц | F303A0390 |
| SER 158/6 без пульта упр. | 115 / 230В, 50 / 60 Гц | F303A0380 |

Основні технічні характеристики

| | |
|-------------------------------|---|
| КІЛЬКІСТЬ ПОЗИЦІЙ | 3 ПОЗИЦІЇ (SER 158 / 3) АБО 6 ПОЗИЦІЙ |
| МАКС. ПОТУЖНІСТЬ | 21 ЗРАЗОК / ДЕНЬ / ПРИСТРІЙ (SER 158 / 3) АБО 42 ЗРАЗКИ / ДЕНЬ / ПРИСТРІЙ (SER 158 / 6) |
| МАСШТАБОВАНІСТЬ | 12 позицій (ДО 4 ПРИСТРОЇВ) (SER 158 / 3) АБО 24 ПОЗИЦІЇ (ДО 4 ПРИСТРОЇВ) (SER 158 / 6) |
| ДИСПЛЕЙ | Сенсорний екран на 7" |
| ВИКОРИСТОВУВАНІ РОЗЧИННИКИ | МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ РІЗНІ РОЗЧИННИКИ |
| ВІДНОВЛЕННЯ РОЗЧИННИКА | > 90 % |
| АВТОМАТИЗОВАНО | ЗАНУРЕННЯ, ВИЛУЧЕННЯ, ПРОМИВАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ |
| ПІДСВІЧУВАННЯ | LED ВІДОБРАЖАЄ 3 / 6 АКТИВНИХ ПОЗИЦІЙ |
| НАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ | Склокераміка – незалежне положення перемикача увімк. / вимк. |
| ОБ'ЄМ ЗРАЗКА | Від 0,5 до 15 г у гільзі 33 x 80 мм (зазвичай 2–3 г) |
| УЩІЛЬНЮВАЧІ | ВІТОН, БУТИЛ І ВАФЛОН |
| КОНДЕНСАТОРИ | ТИТАНОВИЙ (ЗАПАТЕНТОВАНИЙ VELP) |
| ІНТЕРФЕЙС | 3 ВИХОДИ USB, КАБЕЛЬ ПК |
| РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТУ | АВТОМАТИЧНО, ЗБЕРІГАЄТЬСЯ НА CONTROLPAD |
| СПОЖИВАННЯ ВОДИ | ВІД 1,0 Л / ХВ |
| ГАБАРИТИ (ШХВХГ) | 358 x 546 x 450 мм (SER 158/3) 546 x 546 x 450 мм |
| ГАБАРИТИ З ПУЛЬТОМ УПРАВЛІННЯ | 358 x 546 x 570 мм (SER 158 / 3) 546 x 546 x 570 мм (SER 158 / 6) |
| ВАГА | 29 КГ (SER 158 / 3) |
| (SER 158 / ПУЛЬТ УПР.) | 36 КГ (SER 158 / 6) |
| ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ | 115 / 230 В, 50 / 60 Гц |
| СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ | 630 / 850 Вт |

SER 158/6



SER 158/3



Входить до комплекту

| | № |
|---|-----------|
| Пульт управління* | A00000286 |
| Сірий бутиловий ущільнювач, 3 шт./коробка | A00000298 |
| Зелений вітоновий ущільнювач, 3 шт./коробка | A00000297 |
| Екстракційна чашка, Ø 56 x 120 мм 3 шт./коробка | A00000290 |
| Тримач для гільзи, Ø 33 мм | A00000312 |
| Кипілки, 80 г | A00000305 |
| Целюлозні гільзи, 33 x 80 мм, 25 шт./коробка | A00000295 |
| Трубка для введення води | 10000280 |
| Тефлонова трубка, Ø 4 x 6 мм | 10002866 |
| Підключення 1 / 8, NPT-труба 6 x 4 | 10006054 |

* Тільки для S303A0390 і S303A0380

Акcesуари опціонально

| | № |
|---|-----------|
| Білий вафлонний ущільнювач SER 158, 3 шт./коробка | A00000288 |
| Екстракційна чашка, Ø 48 x 120 мм, 3 шт./коробка | A00000303 |
| Екстракційна чашка, Ø 65 x 120 мм, 3 шт./коробка | A00000302 |
| Тримач для гільз, Ø 25 мм | A00000291 |
| Тримач для гільз, Ø 40 мм | A00000292 |
| Целюлозна гільза 25 x 80мм, 25 шт./коробка | A00000294 |
| Целюлозна гільза 40 x 80 мм, 25 шт./коробка | A00000296 |
| Гільза зі скловолокна 25 x 80 мм, 25 шт./коробка | A00000314 |
| Гільза зі скловолокна 33 x 80 мм, 25 шт./коробка | A00000313 |
| Човники для зважування | A00000310 |
| Підставка для гільз на 6 шт. | A00000311 |
| Штатив для екстракційних чашок SER 158 / 6 | A00000304 |
| Тримач тигля HU 6 для SER 158 | A00000293 |
| Скляна пляшка для збору розчинника | A00000301 |
| З'єднувальна NPT-трубка 1/4, Ø 4,3–4,5 мм | A00000299 |
| З'єднувальна NPT-трубка 1/4, Ø 4,8–5 мм | A00000300 |
| З'єднувальний кабель | A00000287 |
| Адаптер USB-RS-232 | A00000195 |
| Кабель для підключення до ПК | A00000289 |
| Подовжувач на 2 м для пульта управління | A00000315 |
| Кваліфікація монтажу / функціонування SER 158 | A00000306 |



рішення для лабораторій

вул. Січових Стрільців, 8, м. Бровари,
Київська обл., 07400, Україна

+380(67)214-04-56
+380(67)219-78-07

info@industry.hlr.ua
industry.hlr.ua